




neodisher® IP Spray



Λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων

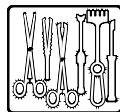

Σπρέι

Τομείς εφαρμογής:

- Για την χειρωνακτική λίπανση χειρουργικών εργαλείων, ειδικά για εργαλεία με αρθρώσεις

Φάσμα δράσης:

- Για την άμεση λίπανση χειρουργικών εργαλείων μετά από αυτοματοποιημένο καθαρισμό, εάν η λίπανση στο πλυντήριο - απολυμαντή είναι ανεπαρκής για αρθρωτά όργανα ή εάν δεν χρησιμοποιείται neodisher IP Konz στο πλυντήριο - απολυμαντή
- Όταν το neodisher IP Spray χρησιμοποιείται όπως προορίζεται, η βιοσυμβατότητα των επεξεργασμένων οργάνων δεν επηρεάζεται. (Βιολογική αξιολόγηση ιατρικών συσκευών σύμφωνα με το EN ISO 10993-1).

Ειδικές ιδιότητες:

- Βασισμένο σε ιατρικό λευκό έλαιο (υψηλής καθαρότητας ορυκτέλαιο / υγρή παραφίνη φαρμακευτικής ποιότητας)
- Δεν δημιουργεί κρούστα
- Αποδεδειγμένα δεν παρεμβαίνει με την επακόλουθη αποστείρωση με ατμό ή θερμό αέρα

Εφαρμογή και δοσολογία:

Ψεκάστε το neodisher IP Spray απευθείας στα εργαλεία, ειδικά στις αρθρώσεις / μεντεσέδες. Κρατήστε το δοχείο ψεκασμού όσο το δυνατόν πιο κάθετα. Για τον ψεκασμό δίσκων χειρουργικών εργαλείων, χρησιμοποιήστε το δοχείο ψεκασμού με έναν κοντό σωλήνα ψεκασμού. Για το σκοπό αυτό ο σωλήνας ψεκασμού με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού με την κομμένη πλευρά στο εξάρτημα ψεκασμού για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα ψεκασμού που δεν παραμορφώνεται από το κόψιμο.

Σημειώσεις για την εφαρμογή:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλες επικυρωμένες διαδικασίες.

- Λάβετε υπόψη τις συστάσεις επανεπεξεργασίας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664

Συστατικά:

Υγρή παραφίνη φαρμακευτικής ποιότητας, μη ιονικά τασιενεργά, προωθητικό αέριο προπάνιο/βουτάνιο

Σήμανση CE:

Το neodisher IP Spray συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Να φυλάσσεται πάντα σε θερμοκρασία μεταξύ 5 ° C και 30 ° C. Χρησιμοποιείται για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στη σφραγίδα στο κάτω μέρος του δοχείου στο σύμβολο της κλεψύδρας.

Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφυλάξεων:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Δοχείο υπό πίεση. Προστατέψτε από το ηλιακό φως και μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C. Μην τρυπάτε και μην καίτε το δοχείο ακόμη και μετά τη χρήση.

MB 4304/3-1

Ημερομηνία έκδοσης: 01/2020

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348



DR. WEIGERT

www.drweigert.com