





neodisher® MediClean forte

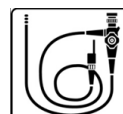

Απορρυπαντικό για την επανεπεξεργασία θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

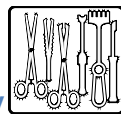

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Αυτόματος καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων MIS, εργαλείων μικροχειρουργικής, εύκαμπτων ενδοσκοπίων, αναισθησιολογικού εξοπλισμού, κοντέινερ εργαλείων και άλλων ιατρικών εργαλείων
- Χειρωνακτικός καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων με βυθισμό ή σε πλυντήρια υπερήχων
- Κατάλληλο επίσης για τον χειρωνακτικό και τον αυτόματο καθαρισμό των εργαλείων da Vinci EndoWrist
- Αυτόματος και χειρωνακτικός καθαρισμός εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)¹

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί αξιόπιστα τα υπολείμματα του αποξηραμένου και μετουσιωμένου αίματος
- Μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα του οργανικού φορτίου και αποτρέπει την εκ νέου απόθεση των υπολειμμάτων πρωτεΐνης
- Πληροί τις τρέχουσες συστάσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Robert-Koch (RKI) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της νέας παραλλαγής της νόσου Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Creutzfeldt-Jakob (vCJD), κατά την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Αφαιρεί παθογόνες μολυσματικές πρωτεΐνες prions των διαφόρων στελεχών δοκιμής, μεταξύ αυτών το στέλεχος δοκιμής vCJD από > 2 Ig (1%, 55 °C, 10 λεπτά)²
- Υποστηρίζει την απομάκρυνση βιοφίλμ
- Κατάλληλο για εργαλεία και σκεύη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, χειρουργικό ατσάλι, οπτικά, συμβατικά πλαστικά και υλικά αναισθησιολογικού εξοπλισμού
- Υλικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο πρέπει πρώτα να ελέγχονται για συμβατότητα

Ειδικές ιδιότητες:

- Εξαιρετική συμβατότητα υλικών
- Πρώτης τάξεως καθαριστική δράση, χάρη στην μοναδική φόρμουλα με βάση τους δότες αλκαλικότητας, τα τασιενεργά και τα ένζυμα

- Όταν χρησιμοποιείται για χειρωνακτικό προ-καθαρισμό το καθαριστικό διάλυμα δεν χρειάζεται να ξεπλυθεί πριν την αυτόματη επανεπεξεργασία με neodisher MediClean forte
- Δεν απαιτείται το στάδιο ουδετεροποίησης στην αυτόματη επανεπεξεργασία, ως εκ τούτου, σύντομοι κύκλοι προγράμματος
- Καμία επισήμανση επικινδυνότητας, μη επικίνδυνο προϊόν

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher MediClean forte μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλυντήρια απολυμαντές, καθώς επίσης σε δοχεία εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων. Η δοσολογία εξαρτάται από το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής και τον εξατομικευμένο βαθμό επιμόλυνσης των αντικειμένων που πρόκειται να καθαριστούν. Όταν επανεπεξεργάζονται εργαλεία da Vinci EndoWrist το neodisher MediClean forte μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια χειρωνακτικού προ-καθαρισμού, σε πλυντήρια υπερήχων για προ-επεξεργασία και στην αυτόματη διαδικασία επανεπεξεργασίας.

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας¹ που καθαρίζεται σε λουτρό εμβάπτισης πρέπει να διαβρέχεται πλήρως με το διάλυμα εφαρμογής καθ' όλη τη διάρκεια της εμβάπτισης. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου νερού.

Οι ακόλουθες παράμετροι συνίστανται κατά τη χρήση του neodisher MediClean forte:

Αυτόματος και χειρωνακτικός καθαρισμός εργαλείων:

Αυτόματος καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων	2 - 10 ml/l (0.2 - 1.0 %)*, e.g. 40 - 60 °C, 10 min
Τυπική δοσολογία	5 ml/l (0.5 %)*, e.g. 55 °C, 10 min
Αυτόματος καθαρισμός ενδοσκοπίων όπως επίσης και ενδοσκοπικών εξαρτημάτων	5 ml/l (0.5 %), 35 - 55 °C, 5 min



neodisher® MediClean forte

Αυτόματος καθαρισμός των εργαλείων da Vinci EndoWrist	8 ml/l (0.8 %), 40 - 55 °C, 10 - 30 min**
Χειρωνακτικός καθαρισμός θερμoανθεκτικών και θερμoευαίσθητων εργαλείων σε δοχεία εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων	5 - 20 ml/l (0.5 - 2 %)*, μεγ. 40 °C, 10 - 30 min
Χειρωνακτικός καθαρισμός εύκαμπτων ενδοσκοπίων όπως επίσης και ενδοσκοπικών εξαρτημάτων σε δοχεία εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων	5 - 30 ml/l (0.5 - 3 %)*, μεγ. 40 °C, 5 - 10 min
Χειρωνακτικός καθαρισμός των εργαλείων da Vinci EndoWrist σε δοχεία εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων	10 ml/l (1.0 %), μεγ. 40 °C

Αυτόματος και χειρωνακτικός καθαρισμός εξοπλισμού ατομικής προστασίας¹:

Χειρωνακτικός καθαρισμός αναπνευστικών συσκευών / αναπνευστήρων και των αξεσουάρ τους σε λουτρό εμβάπτισης	10 ml/l – 30 ml/l (1.0 % - 3.0 %)*, κρύο νερό έως μεγ. 40 °C, 15 – 30 min.
Αυτόματος καθαρισμός ειδικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας ¹ (καθαρισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή), αναπνευστικές συσκευές / αναπνευστήρες και τα αξεσουάρ τους σε πλυντήρια-απολυμαντές ή / και πλυντήρια (προδιαγραφές προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή)	10 ml/l (1 %), 55°C, 2 min

* η δόσολογία εξαρτάται μεταξύ άλλων από τον βαθμό ρύπανσης

** ανάλογα με την αντίστοιχη σύσταση του κατασκευαστή του πλυντηρίου - απολυμαντή

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες δοσομετρικές συσκευές.

Στο στάδιο καθαρισμού και στο τελικό ξέβγαλμα συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού. Όταν χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό στο τελικό ξέβγαλμα λεκέδες νερού αποφεύγονται ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Το στάδιο εξουδετέρωσης που είναι υποχρεωτικό όταν χρησιμοποιούνται τα κλασσικά αλκαλικά απορρυπαντικά δεν είναι απαραίτητο. Κατά την επεξεργασία οφθαλμολογικών εργαλείων συνιστάται ένα επιπρόσθετο ενδιάμεσο ξέβγαλμα με νερό πριν το τελικό ξέβγαλμα.

Το διάλυμα εργασίας για τον χειρωνακτικό καθαρισμό πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά και στην περίπτωση ορατών ρύπων.

Σημειώσεις για την εφαρμογή:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα
- Ξεβγάλτε με νερό τα δοσομετρικά συστήματα συμπεριλαμβάνοντας και τον σωλήνα αναρρόφησης πριν την αλλαγή προϊόντος
- Η επανεπεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα διατάγματα σύμφωνα με την Οδηγία για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα επικυρωμένες διαδικασίες.
- Το διάλυμα εργασίας του neodisher MediClean forte πρέπει να ξεβγάζεται εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό).
- Επεξεργασία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Παρακαλούμε, όπως τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.
- Επεξεργασία εξοπλισμού ατομικής προστασίας¹: Παρακαλούμε, όπως τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για επεξεργασία
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου απολυμαντή.

Αναφορές ειδικών:

Οι μελέτες για την επανεπεξεργασία των εργαλείων da Vinci EndoWrist μπορούν να διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Το neodisher® MediClean forte χρησιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από διάφορους φορείς δοκιμών και πιστοποίησης στο πλαίσιο του εξοπλισμού ατομικής προστασίας¹ όσον αφορά στη συμβατότητα υλικών



neodisher® MediClean forte

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

pH-εύρος	10.4 – 10.8 (2 - 10 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C), σε νερό δικτύου ή σε μαλακό νερό καθώς και στο μεταφερόμενο νερό προ-ξεβγάλματος, η τιμή του pH μπορεί να είναι διαφορετική.
Πυκνότητα	περιπ. 1.1 g/cm ³ (20 °C)
Ιξώδες	< 10 mPa s (συμπύκνωμα, 20 °C)
Συντελεστής τιπλοδότησης	0.77 (σύμφωνα με τις οδηγίες τιπλοδότησης του neodisher MediClean forte)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο 648/2004 για τα απορρυπαντικά:

< 5 % μη ιονικά και ανιονικά τασιενεργά επίσης: ένζυμα

Σήμανση CE:

Το neodisher MediClean forte συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε σε δροσερό χώρο μακριά από παγετό. Πάντα αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 25 °C. Μακριά από το ηλιακό φως. Χρησιμοποιείται για 2 χρόνια αν αποθηκεύεται όπως προτείνεται. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας. 

Μεταβολές στο χρώμα του προϊόντος μπορεί να συμβούν κατά την αποθήκευση σε εργοστασιακά σφραγισμένες εμπορικές μονάδες. Αυτό δεν έχει επίπτωση στις σχετικές με την εφαρμογή ιδιότητες του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Το neodisher MediClean forte δεν είναι επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (ΕΚ) Νο 1272/2008.

Απορρίψτε το δοχείο μόνο όταν αυτό είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Για πληροφορίες ασφάλειας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/ Downloads».

MB 4050/03-4

Ημερομηνία έκδοσης 05/2022

¹ Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), προστατευτικός ρουχισμός για χημικές ουσίες

² Αξιολόγηση της ικανότητας του neodisher MediClean forte να αδραντοποιεί ή/και να αφαιρεί τους παράγοντες της μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ, Prions) από τις επιφάνειες των ιατρικών και χειρουργικών συσκευών, μετά από άμεσο εμβολιασμό πειραματικών μολυσμένων επιφανειών - Υπηρεσία Μελέτης των Prions των Ατυπων Λοιμώξεων

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com