




neodisher® MediClean



Απορρυπαντικό για την επανεπεξεργασία θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

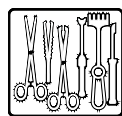

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Αυτόματος και χειρωνακτικός καθαρισμός ιατρικών αντικειμένων όπως χειρουργικά εργαλεία, ενδοσκόπια, αναισθησιολογικός εξοπλισμός και κοντίνερς

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί αξιόπιστα τα υπολείμματα αποξηραμένου, μετουσιωμένου και επιστρωμένου αίματος, που προκαλούνται από τις δραστικές ουσίες απολυμαντικών
- Κατάλληλο για εργαλεία και σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα εργαλείων, τυπικά πλαστικά, καθώς και υλικά για οπτικό και αναισθησιολογικό εξοπλισμό
- Το ανοδιωμένο αλουμίνιο πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί για καταλληλότητα

Ειδικές ιδιότητες:

- Εξαιρετική συμβατότητα υλικών
- Ελαφρώς αλκαλικά ενεργά συστατικά καθαρισμού σε ένα σκεύασμα χαμηλού αφρισμού
- Δεν απαιτείται στάδιο εξουδετέρωσης για αυτοματοποιημένη επανεπεξεργασία, επομένως χρησιμοποιούνται σύντομοι κύκλοι προγραμμάτων

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher MediClean μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλυντήρια απολυμαντές καθώς και σε λουτρά εμβάπτισης και υπερήχων. Η δοσολογία εξαρτάται από το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής και από τον βαθμό ρύπανσης των εργαλείων προς επανεπεξεργασία. Οι ακόλουθες παράμετροι συνιστώνται όταν χρησιμοποιείτε το neodisher MediClean:

Αυτόματος καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων	2 - 10 ml/l (0.2 - 1.0 %)*, π.χ. 40 - 60 °C, 10 λεπτά
--	---

Αυτόματος καθαρισμός ενδοσκοπίων και ενδοσκοπικών εξαρτημάτων	5 ml/l (0.5 %), 35 - 55 °C, 5 λεπτά
Χειρωνακτικός καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων σε λουτρά εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων	5 - 20 ml/l (0.5 - 2 %)*, max. 40 °C, 10 - 30 λεπτά
Χειρωνακτικός καθαρισμός ενδοσκοπίων και ενδοσκοπικών εξαρτημάτων σε λουτρά εμβάπτισης και πλυντήρια υπερήχων	5 - 30 ml/l (0.5 - 3 %)*, max. 40 °C, 5 - 10 λεπτά

* η δοσολογία εξαρτάται από τον βαθμό ρύπανσης

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευές δοσομέτρησης.

Στο στάδιο καθαρισμού και στο τελικό ξέβγαλμα συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού. Όταν χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό στο τελικό ξέβγαλμα, αποφεύγονται οι λεκέδες νερού και επιπλέον το ανοδιωμένο αλουμίνιο προστατεύεται.

Το στάδιο εξουδετέρωσης που είναι υποχρεωτικό όταν χρησιμοποιούνται κλασικά αλκαλικά απορρυπαντικά δεν είναι απαραίτητο. Κατά την επανεπεξεργασία των οφθαλμολογικών εργαλείων συνιστάται ένα πρόσθετο ενδιάμεσο ξέβγαλμα με νερό πριν από την τελική έκπλυση.

Το διάλυμα εργασίας για χειρωνακτικό καθαρισμό πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον καθημερινά και στην περίπτωση ορατής ρύπανσης.

Οδηγίες για την εφαρμογή:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Μην αναμινύετε με άλλα προϊόντα.
- Ξεβγάλτε με νερό τα δοσομετρικά συστήματα συμπεριλαμβάνοντας και τον σωλήνα αναρρόφησης πριν την αλλαγή προϊόντος
- Η επανεπεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα διατάγματα σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα επικυρωμένες διαδικασίες.



neodisher® MediClean

- Το διάλυμα εργασίας του neodisher MediClean πρέπει να ξεβγάζεται εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό).
- Παρακαλούμε, όπως τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των εργαλείων για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 17664.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου απολυμαντή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

τιμή pH	10.2 – 10.5 (2 - 20 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C), η τιμή pH μπορεί να διαφέρει στο νερό δικτύου ή στο μαλακό νερό καθώς επίσης και στο μεταφερόμενο από την πρόπλυση νερό.
Πυκνότητα	περ. 1.1 g/cm ³ (20 °C)
Ιξώδες	< 10 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)
Συντελεστής τιτλοδότησης	0.8 (σύμφωνα με τη μέθοδο ογκομετρικής ανάλυσης neodisher MediClean)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5 % ανιονικά τασιενεργά, μη ιονικά τασιενεργά επίσης ένζυμα,

Σήμανση CE:

Το neodisher MediClean συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε σε δροσερό, αλλά όχι παγωμένο μέρος. Πάντα να αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 25 °C. Αποθηκεύστε μακριά από το ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια εάν αποθηκεύεται όπως προτείνεται. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται στην ετικέτα κάτω από το σύμβολο της κλεψύδρας. 

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Το neodisher MediClean είναι μη επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (ΕΚ) Νο 1272/2008.

Απορρίψτε το προϊόν μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

MB 4043 GB/2-6

Ημερομηνία έκδοσης 08/2020

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΟΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.