




neodisher® Z



Όξινο ουδετεροποιητικό και απορρυπαντικό για την αυτόματη επανεπεξεργασία εργαλείων και γυάλινων σκευών εργαστηρίου

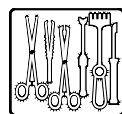

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομέας εφαρμογής:

- Ουδετεροποιητικό αλκαλικών υπολειμμάτων για την αυτόματη επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων, αναισθησιολογικών εξαρτημάτων, δοχείων, χειρουργικών παπουτσιών και βρεφικών μπουκαλιών καθώς και άλλων ιατρικών εργαλείων
- Ουδετεροποιητικό ή καθαριστικό όξινης πρόπλυσης για τον αυτόματο καθαρισμό γυάλινων εργαστηριακών σκευών σε βιομηχανικά, ιατρικά και εργαστήρια αναλύσεων νερού

Φάσμα δράσης:

- Εξουδετερώνει αλκαλικά υπολείμματα από την κύρια πλύση κατά την αυτόματη επανεπεξεργασία
- Αφαιρεί αξιόπιστα υπολείμματα διαλυτά σε οξέα κατά τη διάρκεια της πρόπλυσης
- Εξαιρετική συμβατότητα υλικών. Κατάλληλο για αναισθησιολογικά εξαρτήματα, χειρουργικά εργαλεία και άλλα ευαίσθητα υλικά
- Δεν είναι κατάλληλο για την όξινη πρόπλυση αντικειμένων και εξαρτημάτων από ανοδιωμένο αλουμίνιο, καθώς και αντικειμένων με χρωμιωμένα και επινικελωμένα μέρη

Ειδικά χαρακτηριστικά:

- Βασισμένο σε οργανικά οξέα
- Χωρίς φωσφορικά άλατα, φωσφορικό οξύ, αζωτούχες ενώσεις και επιφανειοδραστικές ουσίες, δεν επιδρά αρνητικά στις αναλυτικές μεθόδους ελέγχου
- Περιέχει λιγότερα από 10 ppm P₂O₅ στο συμπύκνωμα

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher Z προορίζεται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια για εξουδετέρωση ή / και όξινη πρόπλυση. Η δοσολογία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή.

Όταν χρησιμοποιείτε το neodisher Z συνιστώνται οι ακόλουθες παράμετροι:

Για ουδετεροποίηση	1 - 2 ml/l
Για όξινη πρόπλυση/πλύση	2 - 5 ml/l, 40 - 60 °C

Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες δοσομετρικές συσκευές.

Για την αποφυγή λεκέδων νερού, συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα. Ταυτόχρονα, αυτό προστατεύει το ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Όταν χρησιμοποιείτε το neodisher Z για την πρόπλυση αντικειμένων, το πλυντήριο και οι σωλήνες αποβλήτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί στα οξέα. Οι σωλήνες Eternit (ίνες τσιμέντου) και χυτοσίδηρου είναι ακατάλληλοι και απαιτείται προηγούμενη εξουδετέρωση του διαλύματος εκροής.

Γενικές οδηγίες εφαρμογής:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Το διάλυμα neodisher Z πρέπει να ξεπλυθεί εντελώς (προτιμότερο με απιονισμένο νερό).
- Ξεβγάλετε το σύστημα δοσομέτρησης συμπεριλαμβανομένου και του σωλήνα με νερό πριν αλλάξετε προϊόν.
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις σύμφωνα με την Οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πρέπει να εκτελείται με κατάλληλες επικυρωμένες διαδικασίες.
- Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις επανεπεξεργασίας των κατασκευαστών οργάνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 17664 καθώς και τις συστάσεις του κατασκευαστή των γυάλινων σκευών εργαστηρίου.
- Τηρείτε τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου



neodisher® Z

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

MB 4202/03-2 Ημερομηνία έκδοσης 03/2020

εύρος pH	3.0 – 2.6 (1 – 5 ml/l υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	< 10 mPa s (συμπύκνωμα, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.2 g/cm ³ (20 °C)
Συντελεστής τιτλοδότησης	0.36 (σύμφωνα με τη μέθοδο τιτλοδότησης neodisher Z)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
συντηρητικό (2-οκτυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη)

Σήμανση CE



Το neodisher Z συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντα αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ -3 °C και 30 °C.
Διάρκεια ζωής 3 έτη εφόσον αποθηκεύεται όπως προτείνεται.
Για την ημερομηνία λήξης δείτε τη σήμανση στην ετικέτα πίσω από το σύμβολο κλεψύδρα.

Μεταβολές στο χρώμα του προϊόντος μπορεί να συμβούν κατά την αποθήκευση σε εργοστασιακά σφραγισμένες εμπορικές μονάδες. Αυτό δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του προϊόντος που είναι σχετικές με την εφαρμογή για την οποία προτείνεται.

Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφυλάξεων:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση υπολειμμάτων προϊόντος, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο πληροφοριών βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και εμπειρία μας. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από τις δικές του δοκιμές. Μια νομικά δεσμευτική διασφάλιση ορισμένων ιδιοτήτων δεν μπορεί να προκύψει από αυτό.