




neodisher® Septo DN



Απολυμαντικό για την αυτόματη επεξεργασία εύκαμπτων ενδοσκοπίων και θερμοανθεκτικών εργαλείων

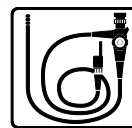

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Για την υψηλού βαθμού απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων και θερμοανθεκτικών εργαλείων σε πλυντήρια- απολυμαντές

Φάσμα δράσης:

- Βακτηριοκτόνος, μυκητοκτόνος, μυκοβακτηριοκτόνος και ιοκτόνος δράση. Επιβεβαιώνεται με πιστοποίηση σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα
- Για το στάδιο του καθαρισμού προτείνεται το απορρυπαντικό neodisher MediClean forte.
- Η διαδικασία επανεπεξεργασίας με το neodisher MediClean forte και το neodisher Septo DN πληροί τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 15883-4 και επιτυγχάνει συνολική μείωση των μικροβίων >9log.

Ειδικές ιδιότητες:

- Ελάχιστη οσμή
- Υψηλή συμβατότητα υλικών. Κατάλληλο για τα ενδοσκόπια όλων των μεγάλων κατασκευαστών.
- Χωρίς φορμαλδεΐδη και άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου.
- Η απολυμαντική του δράση έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14885. Έτσι, το neodisher Septo DN συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επί των απολυμαντικών για την απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων του προτύπου DIN EN ISO 15883-4.
- Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα απολυμαντικών IHO¹

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher Septo DN χρησιμοποιείται σε πλυντήρια - απολυμαντές. Η παροχή του neodisher Septo DN γίνεται μέσω της δοσομετρικής αντλίας του πλυντηρίου στην αρχή της φάσεως απολύμανσης. Οι παρακάτω παράμετροι πρέπει να τηρούνται για να επιτευχθεί το φάσμα δραστηριότητας που αναφέρεται παρακάτω:

Βακτηριοκτόνος, μυκητοκτόνος, μυκοβακτηριοκτόνος και ιοκτόνος δράση	10 ml/l (1.0%), 55 °C, 5 min
---	---------------------------------

Για την αποφυγή λεκέδων νερού συνιστάται να χρησιμοποιείται αποιονισμένο νερό στο τελευταίο ξέβγαλμα.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Το διάλυμα neodisher Septo DN πρέπει να ξεβγάζεται εντελώς με νερό (κατά προτίμηση απιονισμένο).
- Ξεβγάλετε το δοσομετρικό σύστημα συμπεριλαμβανομένου και του δοσομετρικού σωλήνα αναρρόφησης πριν αλλάξετε προϊόν.
- Η επεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις σύμφωνα με την Οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πρέπει να διεξάγεται με κατάλληλες επικυρωμένες διεργασίες.
- Παρακαλούμε, όπως μελετήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.
- Οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του πλυντηρίου-απολυμαντή θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά.
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.

Ειδικές μελέτες:

Η απολυμαντική δράση επιβεβαιώνεται από πιστοποιητικά. Αντίγραφα των μελετών είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τιμή pH	4.3 (1.0%, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	<10 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.0 g/cm ³ (20 °C)

Συστατικά:

Δραστικά συστατικά σε 100 g:
10.5 g γλουταραλδεΐδη

Σήμανση CE:

Το neodisher Septo DN συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.



neodisher® Septo DN

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 30 °C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Για την ημερομηνία λήξης δείτε τη σήμανση στην ετικέτα του δοχείου δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας ⌚.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφάλειας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/Downloads».

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη των υπολειμμάτων προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

MB 4010/3-5

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06/2020

¹Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz [German Association for Hygiene and Surface Protection]

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348



Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνει καμία περιγραφή ποιότητας ή υπόσχεση συγκεκριμένων ιδιοτήτων.