




neodisher® MediKlar

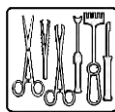

Υγρό διαβρεκτικό για την αυτόματη επανεπεξεργασία θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Διαβροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως χειρουργικά εργαλεία συμπτ. οφθαλμολογικών εργαλείων, αναισθησιολογικού εξοπλισμού, κυτίων αποστείρωσης και εμφυτευμάτων, καθώς και μπιμπερό σε πλυντήρια απολυμαντές

Φάσμα δράσης:

- Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής – για γρήγορο και χωρίς στίγματα στέγνωμα των υλικών που πλένονται
- Συσκευασία αποστείρωσης από χαρτί/αλουμινόφυλλο που έρχεται σε επαφή με ιατροτεχνολογικές συσκευές που επεξεργάστηκαν με neodisher MediKlar δεν θα επηρεαστούν αρνητικά
- Αναισθησιολογικά εξαρτήματα από πολυσουλφόνη (PSU) και πολυφαινολσουλφόνη (PPSU) π.χ. σύνδεσμοι λαρυγγικών масκών, βαλβίδες, προσαρμογείς και τμήματα από καπάκια κυτίων μπορεί να σχηματίσουν ρωγμές τάσης λόγω της διαδικασίας κατασκευής όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία με βοηθήματα έκπλυσης. Αυτά πρέπει να ελέγχονται για καταλληλότητα πριν από τη χρήση
- Όταν το neodisher MediKlar χρησιμοποιείται όπως προορίζεται, είναι τοξικολογικά ασφαλές (ανάλυση σύμφωνα με το EN ISO 10993-1). Περίληψη της τοξικολογικής έκθεσης διατίθεται κατόπιν αιτήματος
- Όταν το neodisher MediKlar χρησιμοποιείται όπως προορίζεται, η βιοσυμβατότητα των επεξεργασμένων εργαλείων δεν επηρεάζεται. (Βιολογική αξιολόγηση ιατρικών συσκευών σύμφωνα με το EN ISO 10993-1).

Ειδικές ιδιότητες:

- Σημαντική μείωση του χρόνου στεγνώματος
- Επομένως μείωση του χρόνου και της κατανάλωσης ενέργειας κατά την αυτοματοποιημένη επανεπεξεργασία

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher MediKlar χρησιμοποιείται στο τελικό στάδιο έκπλυσης σε πλυντήρια απολυμαντές. Η δοσολογία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τα υλικά που θα πλυθούν και την ποιότητα του νερού και είναι 0.3 - 1.0 ml/l. Το neodisher MediKlar δοσολογείται στο τελικό νερό έκπλυσης.

Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός δοσομέτρησης.

Για την αποφυγή στιγμάτων νερού συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα.

Οδηγίες για την εφαρμογή:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Ξεπλύνετε το σύστημα δοσομέτρησης συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα αναρρόφησης πριν αλλάξετε προϊόν
- Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλες επικυρωμένες διαδικασίες.
- Τηρείτε τις συστάσεις επανεπεξεργασίας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

pH	6.4 (0.3 - 1.0 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό 20°C)
Ιξώδες	< 50 mPa s (συμπύκνωμα, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.0 g/cm ³ (20 °C)



neodisher® MediKlar

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΚ) Νο 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5 % ανιονικά τασιενεργά, πολυκαρβοξυλικά
5 - 15 % μη ιονικά τασιενεργά
επίσης συντηρητικά
2-octyl-2H-isothiazol-3-one, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, mixture of: 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-no. 247-500-7] and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-no. 220-239-6] (3:1)

Σήμανση CE:

Το neodisher MediKlar συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Να φυλάσσεται πάντα σε θερμοκρασία μεταξύ 0 ° C και 30 ° C. Χρησιμοποιείται για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας. 

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας.

MB 4045/3-3
Ημερομηνία έκδοσης: 05/2023

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνουμε ποιοτική περιγραφή ή υπόσχεση συγκεκριμένων ιδιοτήτων.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.com
www.drweigert.com