



ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Aniosyme Prime

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Σύνθεση που συνδυάζει δύο πατενταρισμένες αποτελεσματικές φόρμουλες
- Αποτρέπει την ξήρανση των ρύπων
- Αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα από τα 15 λεπτά
- Πυκνός αφρός: τα όργανα καλύπτονται πλήρως
- Ευρεία συμβατότητα



Aniosyme Prime


Απολυμαντικός καθαριστικός αφρός προεπεξεργασίας για ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Έτοιμος προς χρήση απολυμαντικός καθαριστικός αφρός προεπεξεργασίας για βέλτιστη διάλυση των ρύπων στα εργαλεία, με μεγαλύτερο χρόνο παραμονής (έως 72 ώρες) ή πριν από την αυτόματη επεξεργασία.

Αποτρέπει την ξήρανση των ρύπων και διευκολύνει τον προκαθαρισμό με καλό καθαριστικό αποτέλεσμα. Ο παχύς αφρός εγγυάται ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας του εργαλείου. Το Aniosyme Prime είναι συμβατό με μεγάλη γκάμα υλικών. Δεν είναι κατάλληλο για όργανα από ψευδάργυρο ή σίδηρο.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

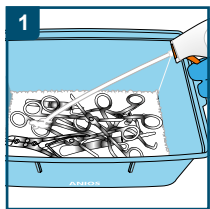


1 Αρχικά, ψεκάστε το κάτω μέρος του δίσκου εμβάπτισης με Aniosyme Prime και τοποθετήστε τα εργαλεία που έχετε συλλέξει.

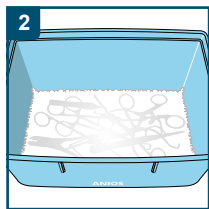

2 Καλύψτε όλα τα εργαλεία με αφρό. Ελάχιστος χρόνος επαφής: 15 λεπτά. Για φυματιοκτόνο δράση, αφήστε να δράσει για 30 λεπτά.

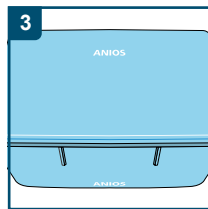

3 Καλύψτε τον δίσκο με καπάκι.

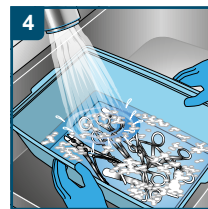

4 Ξεπλύνετε καλά τις επεξεργασμένες ιατρικές συσκευές με νερό βρύσης για να απομακρύνετε όλα τα ίχνη προϊόντος και οργανικών ρύπων πριν από τον αυτόματο ή χειρωνακτικό καθαρισμό.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο Σύμφωνα με τα EN 13727 και EN 14561, ρυπαρές συνθήκες	15 λεπτά
Ζυμοκτόνο Σύμφωνα με τα EN 13624 και EN 14562, ρυπαρές συνθήκες	15 λεπτά
Φυματιοκτόνο Σύμφωνα με τα EN 14348 και EN 14563, ρυπαρές συνθήκες	30 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνο Σύμφωνα με τα EN 14348 και EN 14563, ρυπαρές συνθήκες	60 λεπτά
Δραστικό έναντι ιών με έλυτρο Σύμφωνα με τα EN 14476/EN 17111, ρυπαρές συνθήκες	15 λεπτά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΙΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Aniosyme Prime	Δοχεία 12 x 750ml	870158



CE
0459
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Διανέμεται από:
ECOLAB A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προεπεξεργασία ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων με αφρό: κατά τη μεταφορά σε μη υγρή κατάσταση ή κατά την αποθήκευση μη καθαρίων εργαλείων πριν από τον χειρωνακτικό ή τον αυτόματο καθαρισμό. Το προϊόν διατηρεί επαρκές επίπεδο υγρασίας για την αποφυγή ξήρανσης αίματος και άλλων οργανικών ρύπων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση

1. Αρχικά, ψεκάστε το κάτω μέρος του δίσκου εμβάπτισης με Aniosyme Prime και τοποθετήστε τα εργαλεία που έχετε συλλέξει.
 2. Καλύψτε όλα τα εργαλεία με αφρό. Ελάχιστος χρόνος επαφής: 15 λεπτά. Για φυματιοκτόνο δράση, αφήστε να δράσει για 30 λεπτά.
 3. Καλύψτε τον δίσκο με καπάκι.
 4. Ξεπλύνετε καλά τις επεξεργασμένες ιατρικές συσκευές με νερό βρύσης για να απομακρύνετε όλα τα ίχνη προϊόντος και οργανικών ρύπων πριν από τον αυτόματο ή χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Δεν είναι κατάλληλο για όργανα από ψευδάργυρο ή σίδηρο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανθρακικό τεταρτοταγές αμμώνιο, μη ιονικά τασιενεργά, ενζυματικό σύμπλοκο (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση), αποσκληρυντικοί παράγοντες, έκδοχα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο – να τηρούνται οι προφυλάξεις κατά τη χρήση (που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +25°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση του Aniosyme Prime περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, που διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ECOLAB®

www.ecolab.gr