



ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

OPASTER'ANIOS και BANDELETTES OPASTER'ANIOS (δείκτες)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα
- Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του διαλύματος με ειδικό δείκτη ελέγχου
- Σταθερότητα του διαλύματος εμβάπτισης: 14 ημέρες




OPASTER'ANIOS

Απολυμαντικό υψηλού βαθμού για ιατρικές συσκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μπλε διαυγές διάλυμα
- Δραστικό κατά του *Clostridium difficile*
- Διάλυμα ορθοφθαλαδεϋδης 0,55% με pH 7
- Ευρεία συμβατότητα με όλους τους τύπους υλικών

INSTRUCTIONS FOR USE

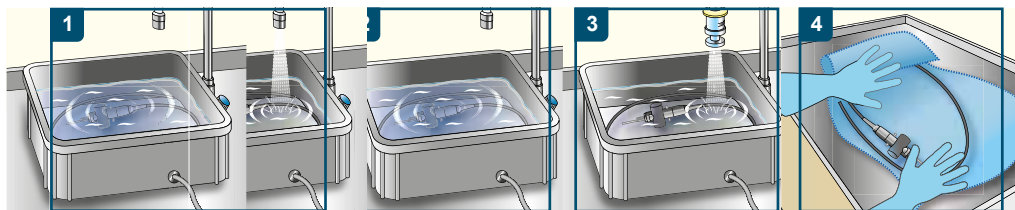

Στάδιο προ-απολύμανσης: Καθαρίζετε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: βουρτσάστε τα κανάλια.

Στάδιο απολύμανσης: Ρίξτε το διάλυμα. Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο επαφής των 5 λεπτών. Διατηρείτε το λουτρό εμβάπτισης καλυμμένο κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: φροντίστε ώστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει στο εσωτερικό των καναλιών. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο OPASTER'ANIOS.

Ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 μm) για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής.

Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Κρατήστε την ιατρική συσκευή άσηπτη όσο το δυνατόν μέχρι την επόμενη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο της ορθοφθαλαδεϋδης με έναν δείκτη ελέγχου OPASTER'ANIOS στην αρχή κάθε ημέρας, κατά την επανεκκίνηση μετά από διακοπή και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Μέγιστη διάρκεια ζωής του λουτρού εμβάπτισης: 14 ημέρες (7 ημέρες για τη Γαλλία.)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13727/EN 14561	5 λεπτά
Ζυμοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13624/EN 14562	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13624/EN 14562	5 λεπτά
Φυματοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14348/EN 14563	5 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14348/EN 14563	5 λεπτά
Δραστικό έναντι των ιών με περίβλημα* σύμφωνα με τα EN 14476/EN 17111	5 λεπτά
Ιοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14476/EN 17111	5 λεπτά
Σποριοκτόνο* σύμφωνα με το EN 17126	30 λεπτά

*= καθαρές συνθήκες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Opaster'Anios	Δοχεία 4 x 5 L	870135
Opaster'Anios	Δείκτες ελέγχου (κουτί των 50)	870136

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση υψηλού βαθμού ιατρικών συσκευών: χειρουργικού και ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ενδοσκόπησης και εξοπλισμού ευαίσθητου στη θερμοκρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάλυμα έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε. Καθαρίστε και ξεπλύνετε προσεκτικά την ιατρική συσκευή προτού την βυθίσετε στο OPASTER'ANIOS.

1. Στάδιο προ-απολύμανσης: Καθαρίστε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά. Για εξοπλισμό ενδοσκόπησης: βουρτσάστε τα κανάλια.
2. Στάδιο απολύμανσης: Ρίξτε το διάλυμα. Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο επαφής των 5 λεπτών. Διατηρείτε το λουτρό εμβάπτισης καλυμμένο κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Για εξοπλισμό ενδοσκόπησης: φροντίστε ώστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει στο εσωτερικό των καναλιών. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο OPASTER'ANIOS.
3. Ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 μm) για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για εξοπλισμό ενδοσκόπησης: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής.
4. Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Κρατήστε την ιατρική συσκευή άσηπτη όσο το δυνατόν μέχρι την επόμενη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο της ορθοφθαλαδεϋδης με έναν δείκτη ελέγχου OPASTER'ANIOS στην αρχή κάθε ημέρας, κατά την επανεκκίνηση μετά από διακοπή και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Μέγιστη διάρκεια ζωής του λουτρού εμβάπτισης: 14 ημέρες (7 ημέρες για τη Γαλλία.)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ρυθμιστικό διάλυμα ορθο-φθαλαδεϋδης (0,55%), χρωστική ουσία, άρωμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο - να τηρούνται οι προφυλάξεις κατά τη χρήση (που καταρτίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +25°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση για το Opaster'Anios περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, ο οποίος διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.

BANDETTES OPASTER ANIOS (δείκτες ελέγχου)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

50 δείκτες ελέγχου του επιπέδου ορθοφθαλδεΐδης στο διάλυμα OPASTER'ANIOS.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βυθίστε τον δείκτη για ένα δευτερόλεπτο και απομακρύνετε το πλεονάζον υγρό χτυπώντας το άκρο του δείκτη σε απορροφητικό χαρτί
- Ανάγνωση μετά από 60 δευτερόλεπτα
Ομοιόμορφο ροζ - ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Ανομοιόμορφο ροζ - ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
- Ποτέ μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα πριν περάσουν 60 δευτερόλεπτα (1 λεπτό) από τη βύθιση
- Για την συχνότητα χρήσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του OPASTER'ANIOS

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Κλείνετε τον περιέκτη αφού πάρετε έναν δείκτη. Φυλάσσεται σε μέρος χωρίς υγρασία. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Διατηρείται για 90 ημέρες μετά το άνοιγμα. Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία του ακολουθώντας όλες τις προφυλάξεις χρήσης. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:

Αποδεκτό
Ομοιόμορφο ροζ



Μη αποδεκτό
Ανομοιόμορφο ροζ





LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Διανέμεται από:

ECOLAB A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι



www.ecolab.gr