

Steranios 2%



Steranios 2% και Bandelettes Steranios 2% (Δείκτες ελέγχου)

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό

- Έτοιμο προς χρήση προϊόν: χωρίς ενεργοποίηση
- Έλεγχος της συμμόρφωσης του απολυμαντικού διαλύματος με δείκτες ελέγχου




Steranios 2%

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Διαυγές πράσινο διάλυμα
- Ευρεία συμβατότητα με όλα τα υλικά
- Διάλυμα γλουταραλδεϋδης 2% ρυθμισμένο σε pH 6 (κιτρικό νάτριο)

Οδηγίες Χρήσης

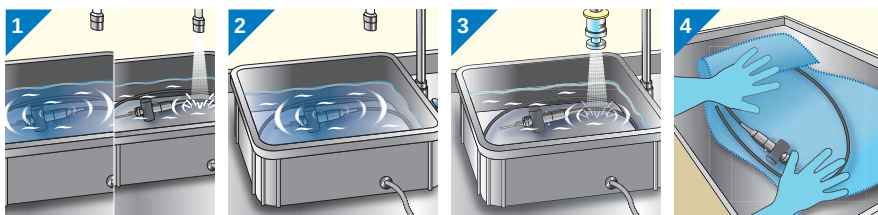

Στάδιο προ-απολύμανσης: Καθαρίζετε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή προ-απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά.

Στάδιο απολύμανσης: Ρίξτε το διάλυμα. Τηρείτε τον προτεινόμενο χρόνο επαφής για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση. Διατηρείτε το λουτρό εμβάπτισης καλυμμένο κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο STERANIOS 2%.

Ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 µm) για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της ιατρικής συσκευής.

Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Φυλάξτε την ιατρική συσκευή σε όσο το δυνατόν πιο άσηπτες συνθήκες μέχρι την επόμενη χρήση.

Μικροβιολογικές ιδιότητες

Αξιώσεις/Συνθήκες	Χρόνος επαφής
Βακτηριοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13727/EN 14561*	5 λεπτά
Ζυμομυκητοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13624/EN 14562*	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13624/EN 14562*	10 λεπτά
Φυματιοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14348/EN 14563*	10 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14348/EN 14563*	10 λεπτά
Ιοκτόνο* σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14476/EN 17111*	10 λεπτά
Σποροκτόνο έναντι του Clostridium difficile* σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126*	60 λεπτά

*= καθαρές συνθήκες

Πληροφορίες συσκευασίας και παραγγελίας

Προϊόν	Συσκευασία	Κωδικός παραγγελίας
Steranios 2%	Δοχεία 4 x 5 L	870015
Steranios 2%	Δείκτες ελέγχου Steranios 2%	870018

CE
0459

Πεδίο Εφαρμογής

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό για θερμοευσίθητα εργαλεία και ενδοσκοπικό εξοπλισμό.

Οδηγίες Χρήσης

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Μην το αραιώνετε. Πριν την εμβάπτιση, καθαρίστε και ξεπλύνετε προσεκτικά την ιατρική συσκευή προτού την βυθίσετε στο STERANIOS 2%.

1. Στάδιο προ-απολύμανσης: Καθαρίζετε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή προ-απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά.
2. Στάδιο απολύμανσης: Ρίξτε το διάλυμα. Τηρείτε τον προτεινόμενο χρόνο επαφής για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση. Διατηρείτε το λουτρό εμβάπτισης καλυμμένο κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο STERANIOS 2%.
3. Ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 µm) για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της ιατρικής συσκευής.
4. Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Φυλάξτε την ιατρική συσκευή σε όσο το δυνατόν πιο άσηπτες συνθήκες μέχρι την επόμενη χρήση.

Για εγγυημένη αποτελεσματικότητα του απολυμαντικού, ελέγξτε το ποσοστό της γλουταραλδεϋδης με δείκτη ελέγχου STERANIOS 2% στην αρχή της διαδικασίας, σε επανεκκίνηση μετά από διακοπή και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Μέγιστη διατήρηση του λουτρού διαβροχής: 30 ημέρες, στη Γαλλία 7 ημέρες.

Σύνθεση

Διάλυμα γλουταραλδεϋδης (2%) ρυθμισμένο σε pH 6, επιφανειοδραστική ουσία, χρωστική ουσία και έκδοχα.

Αποθήκευση

Επικίνδυνο - να τηρούνται οι προφυλάξεις κατά τη χρήση (που καταρτίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +25°C.

Πιστοποιητικά

Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση για το Steranios 2% περιλαμβάνεται στον Επιστημονικό Φάκελο (διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος).

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Χρησιμοποιήστε με ασφάλεια

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Bandelettes Steranios 2%

(Δείκτες ελέγχου)

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό

Ενδείξεις

100 δείκτες ελέγχου για το επίπεδο της γλουταραλδεϋδης στο διάλυμα του STERANIOS 2%.

Οδηγίες Χρήσης

- Βυθίστε τον δείκτη για ένα δευτερόλεπτο, αφαιρέστε τον ενώ τον ανακινείτε για να φύγει η περίσσεια ποσότητα υγρού
- Ανάγνωση μετά από 15 δευτερόλεπτα:
Ομοιόμορφο ροζ - ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ
Ανομοιόμορφο Ροζ - ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ
- Ποτέ μην ερμηνεύετε ένα αποτέλεσμα σε περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα μετά τη βύθιση
- Για την συχνότητα χρήσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του STERANIOS 2%

Αποθήκευση

Κλείστε το δοχείο αφού αφαιρέσετε έναν δείκτη ελέγχου. Φυλάσσεται σε μέρος χωρίς υγρασία. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Διατηρείται για 90 ημέρες μετά το άνοιγμα. Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C.


Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Αφαιρέστε το προϊόν και το δοχείο του ακολουθώντας όλες τις οδηγίες χρήσης. Προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:


ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ

Ομοιόμορφο ροζ

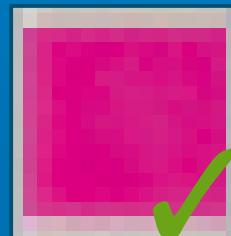

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ

Ανομοιόμορφο Ροζ

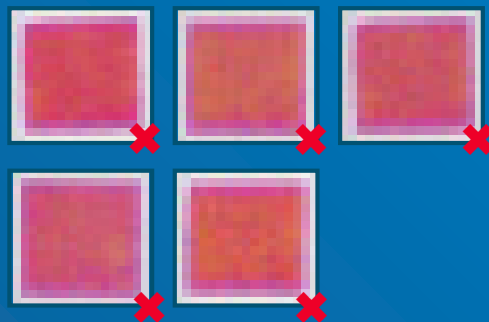

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Διανέμεται από:

ECOLAB A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL[™]