

medi**pal**

Alcohol Wipes

Αυτά τα εξαιρετικά αποτελεσματικά μαντηλάκια γενικής χρήσης περιέχουν 70% ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA), από υλικό με ελάχιστο χνούδι, που παρέχει ελεγχόμενη δόση για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση απολύμανσης με κάθε μαντηλάκι.



Με μια ματιά:



- Χωρίς PHMB
- Χωρίς QUAT
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χωρίς ορατά υπολείμματα

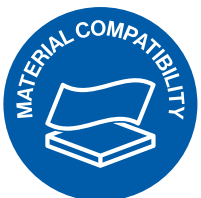
Ιδανικά για:



- Απολύμανση επιφανειών μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού
- Για χρήση όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης
- Ενδιάμεση απολύμανση όπου υπάρχει μόλυνση ή κίνδυνος μόλυνσης*

* Δεν προορίζονται για τελική αποστείρωση

Συμβατότητα υλικών:



- Ακρυλικό (PMMA)
- Πολυκαρβονικό (PC)
- Πολυαιθυλένιο (PE)
- Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
- Αδιάβροχο ύφασμα
- Αλουμίνιο
- 316 ανοξείδωτο ατσάλι
- 304S15 ανοξείδωτο ατσάλι

Βιωσιμότητα:



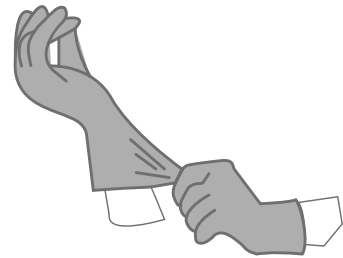
- Ελαφρύτερο δοχείο 2 λίτρων με 27% μείωση πλαστικού
- Το υλικό Tritex, τα δοχεία, τα κουβαδάκια, τα καπάκια και οι ετικέτες είναι πλήρως ανακυκλώσιμα
- Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται στην εξωτερική συσκευασία έχει έγκριση FSC



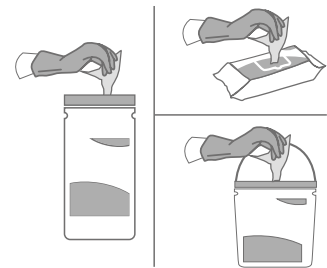
Οδηγίες χρήσης

ΒΗΜΑ 1 Αξιολόγηση κινδύνου

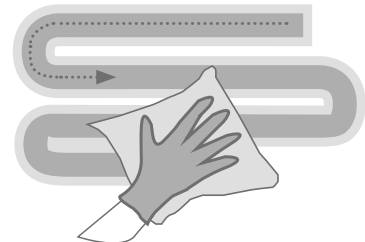
Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες της μονάδας σας για την αξιολόγηση κινδύνου, σχετικά με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής για συμβατότητα με αλκοόλες.

**ΒΗΜΑ 2** Επιλογή μαντηλιού

Ελέγξτε τη συσκευασία για την περίοδο χρήσης και πάρτε ένα μαντηλάκι. Κλείστε τη συσκευασία για να προστατεύσετε τα εναπομείναντα μαντηλάκια. Εάν υπάρχουν ορατοί ρύποι, απομακρύνετε τους με ένα μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε ένα καινούριο μαντηλάκι για να απολυμάνετε την επιφάνεια.

**ΒΗΜΑ 3** Τεχνική S-Shape

Σκουπίστε την επιφάνεια προς απολύμανση με την τεχνική S από την πιο καθαρή στην πιο βρώμικη περιοχή. Χρησιμοποιήστε το μαντηλάκι επίπεδο, χωρίς να το τσαλακώνετε, διασφαλίζοντας ότι όλη η επιφάνεια είναι υγρή. Μην περνάτε την ίδια περιοχή δύο φορές με το ίδιο μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε και δεύτερο καινούριο μαντηλάκι, εάν το πρώτο λερωθεί πολύ ή στεγνώσει.

**ΒΗΜΑ 4** Απόρριψη

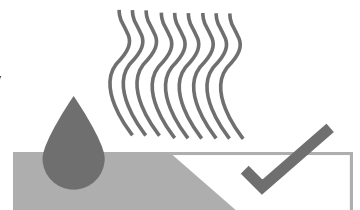
Μην επαναχρησιμοποιείτε μαντηλάκια. Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.



Μην απορρίπτετε
στην αποχέτευση

ΒΗΜΑ 5 Στέγνωμα

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει φυσικά πριν τη χρήση, για τον αναφερόμενο χρόνο επαφής.



Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των μαντηλιών αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Πετάξτε κάθε μαντηλάκι μετά από μία χρήση. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως

medi**pal**

Τεχνικές πληροφορίες

Το υλικό Tritex® ιδιοκτησίας της Medipal, κατασκευάζεται με τη συγκόλληση στρωμάτων ινών πολυπροπυλενίου spunbond και meltblown με μια διεργασία υψηλής θερμότητας. Η προσθήκη μιας υδρόφιλης επίστρωσης σημαίνει βέλτιστη και σταθερή απελευθέρωση υγρού.

Χημική σύνθεση:

Τα Medipal Alcohol Disinfectant Wipes περιέχουν ισοπροπυλική αλκοόλη. Η ισοπροπανόλη χρησιμοποιείται συνήθως ως απολυμαντικό και ως αντισηπτικό. Έχει περιορισμένη υπολειμματική δράση λόγω της εξάτμισης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σύντομους χρόνους επαφής, εκτός εάν η επιφάνεια είναι βυθισμένη και έχει περιορισμένη δραστηριότητα παρουσία οργανικού υλικού.

Οι αλκοόλες είναι πιο αποτελεσματικές όταν συνδυάζονται με καθαρό νερό, καθώς διευκολύνεται η διάχυση μέσω της κυτταρικής μεμβράνης. Ένα μείγμα 70% ισοπροπανόλης είναι αποτελεσματικό ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων και ζυμομυκήτων.

Υλικά:

Το υλικό Tritex® κατασκευάζεται με τη συγκόλληση στρωμάτων ινών πολυπροπυλενίου spunbond και meltblown με μια διαδικασία υψηλής θερμότητας, πριν από την εφαρμογή μιας υδρόφιλης επίστρωσης. Αυτό το υλικό είναι 100% συνθετικό.



Υψηλή αντοχή

Το υλικό προσφέρει υψηλή αντοχή και στις δύο κατευθύνσεις – κατά μήκος και κατά πλάτος του μαντηλιού.



Εξαιρετική συγκράτηση διαλύματος

Διασφάλιση ομοιόμορφης υγρασίας σε όλο το μαντηλάκι.



Ελάχιστα χνούδια

Χαμηλός κίνδυνος να μείνουν μολυσματικές ίνες στις επιφάνειες.



Αποτελεσματική απελευθέρωση διαλύματος

Τα δραστικά συστατικά μεταφέρονται στην επιφάνεια αντί να παγιδεύονται στις ίνες του μαντηλιού.

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικό έναντι	Τεστ	Χρόνος επαφής
-----------------------	------	---------------

Βακτηριοκτόνο

Enterococcus hirae	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό
	EN 14561	1 λεπτό
Pseudomonas aeruginosa	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό
	EN 14561	1 λεπτό
Staphylococcus aureus	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό
	EN 14561	1 λεπτό

Μυκοβακτηριοκτόνο

Mycobacterium avium	EN 14348	1 λεπτό
	EN 14563	1 λεπτό
Mycobacterium terrae	EN 14348	1 λεπτό
	EN 14563	1 λεπτό

Ιοκτόνο

Murine Norovirus	EN 14476	1 λεπτό
Vaccinia virus Ankara (MVA)*	EN 14476	30 δευτ/τα
*This organism represents virucidal efficacy against all enveloped viruses according to EN 14476:2013+A2:2019 Annex A		
Human Coronavirus	EN 14476	30 δευτ/τα

Ζυμοκτόνο

Candida albicans	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13624	1 λεπτό

Πρόσθετοι μικροοργανισμοί

Acinetobacter baumannii	EN 14561	30 δευτ/τα
Enterococcus faecalis (VRE)	EN 14561	1 λεπτό
S. aureus (MRSA)	EN 14561	1 λεπτό

Προϊόντα σε αυτή τη σειρά



125/150 Small Wipe Canister

Πακέτα ανά συσκευασία – 10

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – W508110MPCE
W505110MPCE



200/240 Wipe Canister

Πακέτα ανά συσκευασία – 10

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – W500110MPCE
W600110CE



100 Single Sachets*

Πακέτα ανά συσκευασία – 10

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – SSD502110MPCE



Pal International Limited

Unit 3 Mountpark,
Victoria Road, Bardon II,
Ellistown,
Coalville,
LE69 1FA, UK

E: info@palinternational.com

W: www.palinternational.com

EC REP **Advena Limited**

Tower Business Centre
2nd Floor
Tower Street Swatar
BKR 4013, Malta

E: info@advena.mt

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ85/1348