



ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ANIOXYDE 1000 LD και BANDELETES ANIOXYDE 1000 LD (δείκτες ελέγχου)

ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

- Διάρκεια ζωής πριν από τη χρήση: 24 μήνες
- Κατοχυρωμένη σύνθεση
- Απολυμαντικό υψηλού βαθμού με βάση το σύστημα PHERA®, ενεργό κατά των σπορίων των βακτηρίων
- Γαληνική παραγωγή υπεροξικού οξέος
- Εναλλακτική λύση στη γλουταραλδεϋδη
- Χωρίς αλδεϋδες: Δεν στερεοποιεί τις πρωτεΐνες
- Δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητας του λουτρού με δείκτες ελέγχου
- Πλήρης δραστηριότητα σε 5 λεπτά




ANIOXYDE 1000 LD

Απολυμαντικό υψηλού επιπέδου για ιατρικές συσκευές, για θερμοευαίσθητα εργαλεία και ενδοσκοπικό εξοπλισμό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα λουτρού: ροζ μετά την ενεργοποίηση
- Απουσία ατμών οξέος: μεγαλύτερη ανεκτικότητα από το χρήστη
- Ευκολία χρήσης: ενεργοποιητής ενσωματωμένος στο δοχείο των 5 λίτρων
- Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στα 1000 ppm υπεροξικού οξέος
- Διάρκεια χρήσης του λουτρού εμβάπτισης: Κατά μέγιστο 14 ημέρες (7 ημέρες για τη Γαλλία), έλεγχος της συμμόρφωσης του διαλύματος με δείκτες ελέγχου
- Ευρεία συμβατότητα με υλικά, δοχεία και πάγκους εργασίας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την παρουσία ενός συστήματος απαγωγής ατμών
- Το απολυμαντικό διάλυμα περιέχει ποσότητα υπεροξικού οξέος από 2000 ppm (μετά την ενεργοποίηση) έως 1000 ppm (κατώφλι οριακής συγκέντρωσης που ανιχνεύεται με δοκιμαστικές ταινίες)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

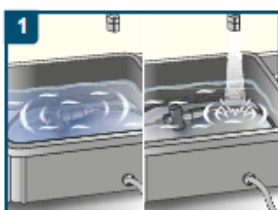


Βήμα προαπολύμανσης:
Καθαρίστε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή προ-απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: βουρτσίστε τα κανάλια.



Βήμα απολύμανσης:
Ρίξτε το ενεργοποιημένο διάλυμα (βλ. διαδικασία ενεργοποίησης στην ετικέτα/πρωτόκολλο). Καλύψτε το δοχείο. Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο επαφής. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: κάντε το διάλυμα να κυκλοφορεί μέσα στα κανάλια. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο Anioxyde 1000 LD.

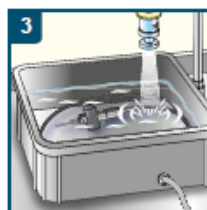

Ξεπλύνετε καλά με αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 μm) για να εξαφανίσετε οποιοδήποτε ίχνος του προϊόντος. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη της ιατρικής συσκευής.

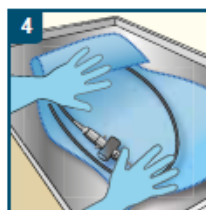

Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Διατηρήστε το προϊόν σε όσο το δυνατόν πιο άσηπτες συνθήκες μέχρι την επόμενη χρήση.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13727/EN 14561, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Ζυμοκτόνο - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13624/EN 14562, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Φυμαιοκτόνο - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14348/EN 14563, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13624/EN 14562, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνο - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14348/EN 14563, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Ιοκτόνο - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14476/EN 17111, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Αδενοϊός - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14476/EN 17111, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Νοροϊός - σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14476/EN 17111, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά
Σποριοκτόνο έναντι των Clostridium difficile και Bacillus subtilis σύμφωνα με το EN 17126, σε καθαρές συνθήκες	5 λεπτά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Anioxyde 1000 LD	4 x δοχείο 5 λίτρων + ενσωματωμένος ενεργοποιητής	870175
Anioxyde 1000 LD	Δείκτες ελέγχου συγκέντρωσης υπεροξικού οξέος έως 1000 ppm στο Anioxyde 1000 (50 ανά κουτί)	870176

CE
0459

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό για ιατρικές συσκευές: χειρουργικό και ιατρικό εξοπλισμό, ενδοσκοπικό εξοπλισμό και θερμοευαίσθητο εξοπλισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάλυμα δύο- συστατικών για επαγγελματική χρήση. Έτοιμο προς χρήση μετά την ενεργοποίηση.

Για δοχείο 5 λίτρων: Ρίξτε όλο τον ενεργοποιητή (φιάλη που περιέχει 39,1 ml) στο βασικό προϊόν (δοχείο 5 λίτρων) και στη συνέχεια ρίξτε το διάλυμα που παράγεται στο λουτρό διαβροχής.

Για φιάλη 1 λίτρου: Ρίξτε όλο τον ενεργοποιητή (φιάλη που περιέχει 8,9 ml) στο βασικό προϊόν (δοχείο 1 λίτρου) και στη συνέχεια ρίξτε το διάλυμα που παράγεται στο δοχείο εμβάπτισης. Πριν από την πρώτη χρήση, περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την ενεργοποίηση του προϊόντος). Καθαρίστε προσεκτικά και ξεπλύνετε την ιατρική συσκευή πριν την εμβάπτιση στο ANIOXYDE 1000 LD (ενεργοποιημένο διάλυμα).

Ελέγξτε το επίπεδο υπεροξικού οξέος με έναν δείκτη ελέγχου ANIOXYDE 1000 LD στην αρχή της διαδικασίας, κατά την επανεκκίνηση μετά από διακοπή και κάθε 4 ώρες συνεχούς χρήσης. Μέγιστη αποθήκευση του λουτρού εμβάπτισης: 14 ημέρες (στην Γαλλία -7 ημέρες μέγιστο σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία).

- Βήμα προαπολύμανσης: Καθαρίστε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή προ-απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: βουρτσίστε τα κανάλια.
- Βήμα απολύμανσης: Ρίξτε το ενεργοποιημένο διάλυμα (βλ. διαδικασία ενεργοποίησης στην ετικέτα/πρωτόκολλο). Καλύψτε το δοχείο. Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο επαφής. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: κάντε το διάλυμα να κυκλοφορεί μέσα στα κανάλια. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο Anioxyde 1000 LD.
- Ξεπλύνετε καλά με αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 μm) για να εξαφανίσετε οποιοδήποτε ίχνος του προϊόντος. Για ενδοσκοπικό εξοπλισμό: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη της ιατρικής συσκευής.
- Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Διατηρήστε το προϊόν σε όσο το δυνατόν πιο άσηπτες συνθήκες μέχρι την επόμενη χρήση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Γαλλική παραγωγή υπεροξικού οξέως από ακετυλο-καπρολακτάμη (σύστημα PHERA), Το ANIOXYDE 1000 LD Generator περιέχει 3% υπεροξειδίου του υδρογόνου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο - Τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης (Συντάσσονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C. Αποθηκεύεται σε καθετήρ θρο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση για το Anioxyde 1000 LD περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, ο οποίος διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ - ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

BANDETTES ANIOXYDE 1000 LD (δείκτες ελέγχου)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

50 δείκτες ελέγχου για το επίπεδο του υπεροξικού οξέος στο τελικό διάλυμα του Anioxyde 1000 LD.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βυθίστε τον δείκτη στο διάλυμα για ένα δευτερόλεπτο, απομακρύνετε τον ενώ τον ανακινείτε για να απομακρύνετε περίσσεια ποσότητα του υγρού
- Διαβάστε μετά από 10 δευτερόλεπτα:
Ομοιόμορφο μαύρο χρώμα σε όλο το εύρος αντίδρασης - ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Ανομοιόμορφος χρωματισμός, σημάδια λευκών κηλίδων, το χρώμα σύντομα ξεθωριάζει - ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
- Ποτέ μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα σε περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα μετά τη βύθιση
- Για τη συχνότητα χρήσης, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ετικέτα του ANIOXYDE 1000 LD

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Κλείστε το κουτί μετά τη λήψη του κάθε δείκτη. Διατηρείτε μακριά από υγρασία. Τηρείτε την αναγραφόμενη στην ετικέτα ημερομηνία λήξης. Αποθηκεύστε έως 90 ημέρες μετά το άνοιγμά τους σε θερμοκρασίες από +5 έως +25 βαθμούς κελσίου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ


Μεταφέρετε το προϊόν και το κουτί του ακολουθώντας όλες τις ενδείξεις χρήσης. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:

ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Ενιαίο μαύρο σε όλον
τον δείκτη

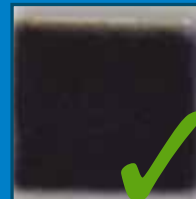

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Ανομοιόμορφος χρωματισμός,
σημάδια λευκών κηλίδων, το χρώμα
σύντομα ξεθωριάζει





LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Διανέμεται από:

ECOLAB A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι



www.ecolab.gr