



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Aniosyme XL3

ΧΛ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το Aniosyme XL3 είναι ένα ούδετερο ενζυμαντικό προ-απολυμαντικό για χειρωνακτική επανεπεξεργασία εργαλείων. Παρέχει ισχυρή καθαριστική δράση, η ειδικά ανεπτυγμένη τρι-ενζυματική του φόρμουλα, προσφέρει εξαιρετική συμβατότητα υλικών με τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις στους χαμηλότερους χρόνους επαφής.

- **ΜΟΝΑΔΙΚΗ** - πατενταρισμένη φόρμουλα
- **ΔΥΝΑΤΟ** - Απορρυπαντικό πολύ υψηλής απόδοσης
- **ΓΡΗΓΟΡΟ** - Βελτιστοποιημένη αντιμικροβιακή δράση από τα 5 πρώτα λεπτά
- **ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ** - Δεν διαβρώνει τα υλικά



Aniosyme XL3

XL ενζυματική προ-απολυμαντική δύναμη καθαρισμού για προχωρημένη χειρωνακτική επανεπεξεργασία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Διαυγές πορτοκαλί διάλυμα
- Πυκνότητα 20°C 1,18g/ml
- Τιμή pH* (συμπυκνωμένου προϊόντος) 20°C: 7,84
- Τιμή pH αραιωμένου προϊόντος 0,5%: 8,06
- Τιμή pH αραιωμένου προϊόντος 1%: 7,96
- Αγωγιμότητα σε 0,5%, 1% and 2%: 0,72 - 1,30 - 2,33 mS/cm

*Μετρήσεις pH υπο συνθήκες εργασίας πάντα με pHμετρο με αντιστάθμιση θερμοκρασίας.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




Συμπυκνωμένο διάλυμα για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιήστε για βυθισμό στο απαιτούμενο διάλυμα, τηρήστε τον χρόνο επαφής.

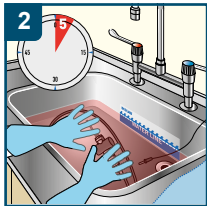

Βυθίστε πλήρως την ιατρική συσκευή. Καλύψτε το δοχείο απολύμανσης. Βουρτσίστε εάν υπάρχουν ορατοί ρύποι.

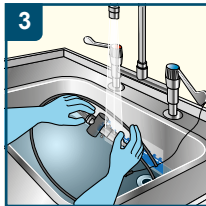

Ξεπλύνετε καλά την επεξεργασμένη ιατρική συσκευή με νερό βρύσης και αφαιρέστε όλα τα ίχνη του προϊόντος και των οργανικών ρύπων.

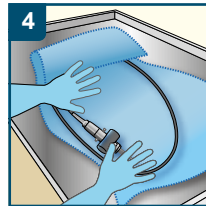

Αντικαταστήστε το διάλυμα όταν είναι εμφανώς λερωμένο και το λιγότερο μία φορά την ημέρα για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Προσαρμόστε την αντλία πριν την πρώτη χρήση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΛΙΤΡΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
	0,5%	1%
1 λίτρο	5 ml	10 ml
2 λίτρο	10 ml	20 ml
4 λίτρο	20 ml	40 ml
8 λίτρο	40 ml	80 ml

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Απολύμανση εργαλείων - Σύμφωνα με το VAH (βακτηριοκτόνο και ζυμοκτόνο) ρυπαρές συνθήκες	0,5%	15 min
Βακτηριοκτόνο - Σύμφωνα με το EN 13727 και EN 14561 ρυπαρές συνθήκες	0,5%	5 min
Ζυμοκτόνο - Σύμφωνα με το EN 13624 και EN 14562, ρυπαρές συνθήκες	0,5%	5 min
Φυμαιοκτόνο - Σύμφωνα με το EN 14348 και EN 14563, ρυπαρές συνθήκες	1,0%	30 min
Αποτελεσματικό έναντι ιών με περίβλημα - Σύμφωνα με το EN 14476/EN 17111, ρυπαρές συνθήκες	0,5%	15 min

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Aniosyme XL3	12 x 1 L δοχεία	XXXXXX
Aniosyme XL3	2 x 5 L δοχεία	XXXXXX



CE
0459
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Διανέμεται από:
ECOLAB A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 280
& Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρισμός και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων: χειρουργικών και ιατρικών συσκευών, θερμοευσίσθητων εργαλείων και εξοπλισμού ενδοσκόπησης, πριν την αποστείρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπυκνωμένο διάλυμα για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιήστε για βυθισμό στο απαιτούμενο διάλυμα, τηρήστε τον χρόνο επαφής.

Βυθίστε πλήρως την ιατρική συσκευή. Καλύψτε το δοχείο απολύμανσης. Βουρτσίστε εάν υπάρχουν ορατοί ρύποι.

Ξεπλύνετε καλά την επεξεργασμένη ιατρική συσκευή με νερό βρύσης και αφαιρέστε όλα τα ίχνη του προϊόντος και των οργανικών ρύπων.

Αντικαταστήστε το διάλυμα όταν είναι εμφανώς λερωμένο και το λιγότερο μία φορά την ημέρα για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Προσαρμόστε την αντλία πριν την πρώτη χρήση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Τεταρτοταγές ανθρακικό αμμόνιο, μη ιονικά τασιενεργά, σύμπλεγμα ενζύμων (πρωτεάση, αμυλάση και μαννανάση), συμπλοκοποιητικός παράγοντας, άρωμα, χρωστικές, έκδοχα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις κατά τη χρήση (καταρτίστηκε σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες που ισχύουν για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: Μεταξύ +5°C και +25°C.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατροτεχνολογικό Προϊόν. Πλήρη αντιμικροβιακή δράση για το Aniosyme XL3 που συμπεριλαμβάνεται στον Επιστημονικό Φάκελο (διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος).

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλώ διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ECOLAB

www.ecolab.gr