




neodisher® LaboClean A 8



Αλκαλικό απορρυπαντικό για την
αυτόματη επανεπεξεργασία γυάλινων
σκευών εργαστηρίου

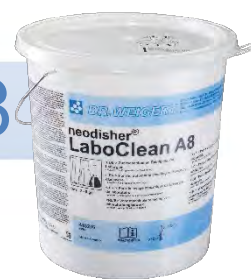

Σκόνη

Τομείς εφαρμογής:

- Αυτοματοποιημένος καθαρισμός εργαστηριακών γυάλινων αντικειμένων και εργαλείων σε ιατρικά, βιολογικά και χημικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια της βιομηχανίας τροφίμων και άλλων βιομηχανιών

Φάσμα δράσης:

- Άριστη καθαριστική απόδοση, αφαιρεί αίμα, πρωτεΐνες και υπολείμματα τροφών
- Κατάλληλο για γυαλί¹, κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό²
- Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και άλλα κράματα ελαφρών μετάλλων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό οποιασδήποτε σκληρότητας

Ειδικές ιδιότητες:

- Καθαριστικό γενικής χρήσης
- Χωρίς τασιενεργά
- Οξειδωτική δράση μέσω ενεργού χλωρίου
- Επίσης κατάλληλο για καθαρισμό χωρίς υπολείμματα, καλλιεργειών ιστών και κυτταρικών στρωμάτων

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher LaboClean A 8 χρησιμοποιείται σε ειδικά πλυντήρια απολυμαντές για εργαστηριακό εξοπλισμό. Η δοσολογία εξαρτάται κυρίως από τη χρήση και το βαθμό ρύπανσης των προς πλύση αντικειμένων. Συνιστώνται οι παρακάτω παράμετροι όταν χρησιμοποιείτε neodisher LaboClean A8

Αυτόματος καθαρισμός γυάλινων σκευών εργαστηρίου και εργαλείων	2 - 5 g/l (0,2 - 0,5%)
--	------------------------

Εάν αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσματικό υλικό έχουν υποστεί υγρό κλιβανισμό πριν από τον αυτόματο καθαρισμό, πρέπει να προστεθεί neodisher LM 2 σε συγκέντρωση 30 ml/l (3,0%) για τη βελτίωση της αφαίρεσης ρύπων. Αυτό σημαίνει ότι 300 ml neodisher LM 2 πρέπει να προστεθούν σε 10 λίτρα νερού.

Τα υπολείμματα μέσου καλλιέργειας πρέπει να απομακρύνονται πριν από τον αυτόματο καθαρισμό. Σε μικροβιολογικά εργαστήρια, συνιστάται δόση 3 g/l neodisher LaboClean GK ή 4 ml/l neodisher LaboClean FT μέσω δοσομετρικού συστήματος αντί για neodisher LaboClean A 8.

Δειγματοληπτικές εφαρμογές:

Απομάκρυνση υπολειμμάτων αίματος και ορού	
Οι αποθέσεις αίματος πρέπει να απομακρύνονται πριν από τον αυτόματο καθαρισμό	
Πρόπλυση	2 x με κρύο νερό χωρίς προσθήκη προϊόντων ή με προσθήκη neodisher N, 2 ml/l
Πλύση	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l; σε περίπτωση σχηματισμού αφρού μπορεί να προστεθεί neodisher Entschäumer S, 0.05ml/l
Εξουδετέρωση	neodisher N, 1 - 2 ml/l.

Απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφίμων όπως πρωτεΐνες, άμυλο, τανίνες, λίπη και έλαια	
Πρόπλυση	κρύα, χωρίς την προσθήκη προϊόντων
Πλύση	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l; σε περίπτωση σχηματισμού αφρού μπορεί να προστεθεί neodisher Entschäumer S, 0.05ml/l
Εξουδετέρωση	neodisher N, 1 - 2 ml/l.

Απομάκρυνση καταλοίπων φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων, βερνικιών και ζελατίνης	
Πρόπλυση	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l, από κρύο έως 70 °C ανάλογα με το είδος του ρύπου
Πλύση	neodisher LaboClean A 8, 3 - 5 g/l; προσθήκη neodisher EM σε περίπτωση αδιάλυτων χρωστικών
Εξουδετέρωση	neodisher N, 1 - 2 ml/l.

Για την αποφυγή στιγμάτων νερού, συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα.

¹ Γυαλιά κατάλληλα για αυτοματοποιημένο αλκαλικό καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

² Πλαστικά που είναι κατάλληλα για αυτοματοποιημένο αλκαλικό καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή



neodisher® LaboClean A 8

Γενικές οδηγίες χρήσης:

- Το διάλυμα neodisher LaboClean A 8 πρέπει να ξεπλυθεί εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό).
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου
- Τηρήστε τις συστάσεις καθαρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή των γυάλινων αντικειμένων εργαστηρίου, καθώς και τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου "(AK LAB) στην τρέχουσα έκδοση της μπροσούρας "Laboratory Glassware Reprocessing - safe and residue-free reprocessing of laboratory glassware"
- Για επαγγελματική χρήση μόνο

Εάν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις οδηγίες για την επεξεργασία τροφίμων.

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4102 EN/3-1

Ημερομηνία έκδοσης 06/2020

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πυκνότητα	περ. 1.200 g/l
εύρος pH	12.0 - 12.4 (2 - 5 g/l, σε απιονισμένο νερό 20 °C)
Συντ. τιτλοδότησης	0.28 (σύμφωνα με τη μέθοδο τιτλοδότησης neodisher)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5 % λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο
15-30% φωσφορικά άλατα

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Το προϊόν τείνει να κάνει σβώλους όταν εκτίθεται σε υγρασία και αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια αποτελεσματικότητας. Φυλάσσετε σε μέρος χωρίς παγετό και μακριά από το ηλιακό φως. Να φυλάσσεται πάντα σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 25°C. Χρησιμοποιείται για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλειψύδρας. ☞

Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης:

Για πληροφορίες ασφαλείας, δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφάλειας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.