


ANIOSYME PRIME

Nettoyant et
désinfectant de
l'instrumentation

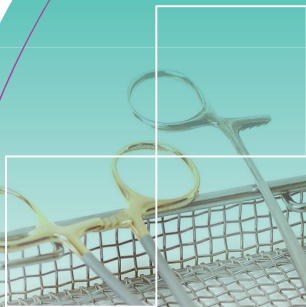

LABORATOIRES

ANIOS

An Ecolab Company

750ml

UN23670750MCAR-220617
3133002F/17JUN22/S0

ANIOSYME PRIME

EN Cleaning and disinfection of the instrumentation

INDICATIONS: Pre-treatment of surgical instrumentation in foam: during a dry mode of transport or during storage of soiled instruments before machine or manual washing. Maintains an adequate level of humidity to avoid blood and other organic materials drying. **COMPOSITION:**

Quaternary ammonium carbonate, non-ionic surfactants, enzymatic complex (protease, lipase, and amylase), sequestering agent and excipients. **MICROBIOLOGICAL PROPERTIES:** Bactericidal* according to EN 13727/EN 14561 in 15 min. Yeasticidal* according to EN 13624/EN 14562 in 15 min. Tuberculocidal* according to EN 14348/EN 14563 in 30 min. Mycobactericidal* according to EN 14348/EN 14563 in 60 min. Active against enveloped viruses* according to EN 14476/EN 17111 in 15 min. *dirty conditions. **INSTRUCTIONS**

FOR USE: Ready-to-use solution. Beforehand, spray the bottom of the soaking tray with Aniosyme Prime and place instruments collected. Re-cover all the instruments with foam. Cover the tray with the lid. Minimum contact time in the system: 15 minutes. For tuberculocidal activity, allow 30 minutes contact time. Thoroughly rinse treated medical devices with tap water to remove all traces of product and organic soiling before machine or manual cleaning. Not suitable for instruments made of zinc or iron. Scientific dossier (efficacy, compatibility, etc.) available on request.

PRECAUTIONS FOR USE: Contains alcohols, C8-10, ethoxylated. (H318) Causes serious eye damage. (P280) Wear eye/face protective equipment. (P305 + P351 + P338) IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. (P310) Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Dispose of the product and its container, following all precautions for use. Reserved for professional use. Made in France.

© Keep out of the reach of children. Anti-Poison Center Tel: 210 7793777 (Greece), 1401 (Cyprus).

EL Καθαρισμός και απολύμανση εργαλείων

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προεπεξεργασία ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων με αφρό: κατά την μεταφορά χωρίς υγρό μέσο ή κατά την αποθήκευση ακαθάρτων εργαλείων πριν από το πλύσιμο σε μηχανήματα ή στο χέρι. Διατηρεί επαρκή υγρασία για την αποφυγή της ξήρανσης του αίματος και άλλων οργανικών ουσιών. **ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ανθρακικό προπιονικό αμμόνιο, μη ιονικά επιφανειοδραστικά, σύμπλοκο ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση και αμυλάση), συμπλοκοποιητής και έκδοχα. **ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Βακτηριοκτόνο* σύμφωνα με την EN 13727/EN 14561 σε 15 λεπτά. Ζυμομυκητοκτόνο* σύμφωνα με την EN 13624/EN 14562 σε 15 λεπτά. Φυματιοκτόνο* σύμφωνα με την EN 14348/EN 14563 σε 30 λεπτά. Μυκοβακτηριοκτόνο* σύμφωνα με την EN 14348/EN 14563 σε 60 λεπτά. Δραστικό έναντι των ιών με μανδύα* σύμφωνα με την EN 14476/EN 17111 σε 15 λεπτά. *σε ρυπαρές συνθήκες. **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Διάλυμα έτοιμο για χρήση. Αρχικά, ψεκάστε τον πυθμένα του δοχείου διαβροχής με Aniosyme Prime και τοποθετήστε στο δοχείο τα εργαλεία που μαζεύσατε. Καλύψτε όλα τα εργαλεία με αφρό. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο δοχείο. Ελάχιστος χρόνος επαφής: 15 λεπτά. Για δράση φυματιοκτόνου, τηρείτε χρόνο επαφής 30 λεπτών. Ξεπλύνετε τις ιατρικές συσκευές που υποβλήθηκαν σε καθαρισμό με άφθονο νερό της βρύσης για να απομακρύνετε κάθε ίχνος προϊόντος και οργανικών ακαθαρσιών πριν προβείτε σε καθαρισμό χειροκίνητα ή με μηχανήματα. Δεν είναι κατάλληλο για εργαλεία από ψευδάργυρο ή σίδηρο. Επιστημονικός φάκελος (αποτελεσματικότητα, συμβατότητα...) διαθέσιμος μετά από αίτημα. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Περιέχει αλκοόλες, C8-10, αιθοξυλιωμένες. (H318) Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. (P280) Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/προσωπο. (P305 + P351 + P338) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. (P310) Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΗΛΗΘΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Διάθεση του προϊόντος και του δοχείου του λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις χρήσης. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Παραγεται στην Γαλλία. © Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777 (Ελλάδα), 1401 (Κύπρος).



**DANGER
ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



OB2367890750MCAV-260202
3160463B/02FEB26/50



LABORATOIRES ANIOS
1, rue de l'Espoir
59260 Lezennes - FRANCE
Tél : +33 3 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



**UFI : S05X-GQAK
CF0X-6YJD**

750ml

LOT

